

VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab


• Zasada działania

Zestaw testowy VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab jest testem opartym na chromatograficznej metodzie immunologicznej służącym do jakościowego wykrywania przeciwciała przeciwko *Toxoplasma gondii* w surowicy, osoczu lub pełnej krwi kotów. Zestaw testowy VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab ma litery "T" oraz "C" jako linie testowa oraz kontrolna na powierzchni urządzenia. Zarówno linia testowa jak i linia kontrolna nie są widoczne w oknie wynikowym przed umieszczeniem próbek. Linia kontrolna służy do kontroli proceduralnej, powinna pojawić się zawsze w sytuacji należytego przeprowadzenia procedury testowej i właściwego działania odczyzników testowych. Fioletowa linia testowa będzie widoczna w oknie wynikowym, jeżeli w próbce będzie znajdować się odpowiednia ilość przeciwciała przeciwko *T. gondii*. W tescie wykorzystany jest specjalny wyselokjonowany rekombinowany antigen *T. gondii* jako materiał wychwytujący. Pozwala testowi VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab na wykrycie z dużą dokładnością przeciwciał przeciwko *T. gondii* w kocie surowicy, osoczu lub pełnej krwi.

• Zawartość zestawu (5/10 – testów/zestawów)

- 1) Dziesięć (5/10) urządzeń testowych VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab
- 2) Jeden (1) rozcieraczka (3 ml)
- 3) Dziesięć (5/10) jednorazowych rurek kapilarnych
- 4) Dziesięć (5/10) butelek z antykoagulantem
- 5) Jedna (1) instrukcja użycia

◆ Ciemny kolor linii znajdującej się na rurce kapilarnej jest wskaźnikiem 10 µl.

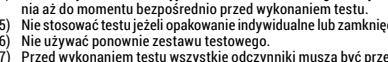

• Środki ostrożności

- 1) Wyłącznie do użytku w diagnostyce weterynaryjnej.
- 2) Do badania należy używać wyłącznie próbek od kotów. Nie należy stosować u innych zwierząt.
- 3) Aby uzyskać optymalne wyniki, należy ścisłe stosować się do instrukcji.
- 4) Nie należy otwierać ani wymielać zestawu testowego z indywidualnego opakowania aż do momentu bezpośrednio przed wykonyaniem testu.
- 5) Nie stosować testu, jeżeli opakowanie indywidualne lub zamknięcie jest uszkodzone.
- 6) Nie używać ponownie zestawu testowego.
- 7) Przed wykonyaniem testu wszystkie odczyzniki muszą być przechowywane w temperaturze pokojowej.
- 8) Nie używać odczyzników po upływie daty ważności oznaczonej na etykiecie.
- 9) Elementy składowe tego zestawu zostały skontrolowane pod kątem jakości jako standardowa partia. Nie mianość komponentów z różnych numerów serii.

• Przechowywanie i stabilność

- 1) Zestaw może być przechowywany w temperaturze pokojowej lub w warunkach chłodniczych (2–30°C). NIE ZAMRAŻAĆ.
- 2) Nie przechowywać testu w bezpośrednim nasłonecznieniu.
- 3) Test pozostaje stabilny do daty ważności oznaczonej na etykiecie opakowania.

EN

VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab Test Kit

• Principles

The VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab Test Kit is a chromatographic immunoassay for the qualitative detection of antibody against *Toxoplasma gondii* in feline serum, plasma or whole blood. The Antigen Rapid Feline Toxoplasma Ab Test Kit has the letter "T" and "C" as test line and control line on the surface of the device. Both the test line and control line in the result window are not visible before applying any samples. The control line is used for procedural control, and should always appear if the test procedure is performed properly and the test reagents of the control line are working. A purple test line will be visible in the result window if there are enough antibodies against *T. gondii* in the specimen.

The specially selected recombinant *T. gondii* antigen is used in the test band as a capture material. These enable the VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab Test Kit to identify antibody against *T. gondii* in feline serum, plasma or whole blood with a high degree of accuracy.

• Materials provided (5/10 Tests/Kit)

- 1) Ten (5/10) VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab Test Devices
- 2) One (1) Assay diluents (3 ml)
- 3) Ten (5/10) Disposable capillary tubes
- 4) Ten (5/10) Anti-coagulant bottles
- 5) One (1) Instruction for use
- ◆ A dark color score line on the capillary tube is the indicator line for 10 µl.



• Precautions

- 1) For veterinary diagnostic use only.
- 2) This kit is for only cat. Do not apply to other animals.
- 3) For the best results, strict adherence to the instructions is required.
- 4) Do not open or remove test kit from their individually sealed pouches until immediately before use.
- 5) Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.
- 6) Do not reuse test kit.
- 7) All reagents must be at room temperature before running assay.
- 8) Do not use reagents beyond the stated expiration date marked on the label.
- 9) The components in this kit have been quality control tested as standard batch unit. Do not mix components from different lot numbers.

• Storage and Stability

- 1) The kit can be stored at room temperature or refrigerated (2–30°C). DO NOT FREEZE.
- 2) Do not store the test kit in direct sunlight.
- 3) The test kit is stable through the expiration date marked on the package label.

ES

VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab Test Kit


• Criterios

El Kit de Testare Rapida VetExpert Toxoplasma Felina Ab es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa del anticuerpo contra el *Toxoplasma gondii* en suero feline, plasma y sangre entera. El Antigen Rapid Feline Toxoplasma Ab Test Kit tiene la letra "T" y "C" significando test line y control line en la superficie del dispositivo. Tanto la linea de test como la de control no son visibles en la ventana de resultados hasta que se introduce una muestra. La linea de control se usa para el control procesal, y debería aparecer siempre si el proceso del test se ha realizado correctamente y los reactivos de la linea de control están funcionando. Una linea de test púrpura será visible en la ventana de resultados si hay suficientes anticuerpos contra el *T. gondii* en la muestra.

El antigén *T. gondii* especialmente seleccionado se usa en la banda del test como un material de captura. Esto permite al VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab Test Kit identificar anticuerpos contra *T. gondii* en suero feline, plasma o sangre entera con un alto grado de eficacia.

• Materiales proporcionados (5/10 Tests/Kit)

- 1) Diez (5/10) dispositivos VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab Test
- 2) Un (1) diluyente analítico (3ml)
- 3) Diez (5/10) tubos capilares desechables
- 4) Diez (5/10) botellas anticoagulantes
- 5) Unas instrucciones de uso
- ◆ Una marca de color oscuro en el tubo capilar es la linea que indica los 10 µl.

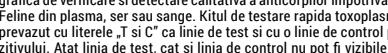

• Precauciones

- 1) Uso exclusivo para diagnóstico veterinario.
- 2) Este kit es solo para gatos. No aplicar en otros animales.
- 3) Para los mejores resultados, se requiere adherirse de forma estricta a las instrucciones.

4) Todas las muestras deben ser manejadas como potencialmente infecciosas.

5) No abrir o extraer los kits de test de sus envoltorios sellados individualmente hasta justo antes de su uso.

6) No usar el kit de test si el envoltorio ha sido dañado o el precinto está roto.

7) No reutilizar los kits de test.

8) Todos los reactivos deben estar a temperatura ambiente antes de llevar a cabo el análisis.

9) No utilizar los reactivos pasado la fecha de caducidad mencionada en la etiqueta.

• Almacenamiento y Estabilidad

El kit puede ser almacenado a temperatura ambiente (2–30°C) o refrigerado. El kit es estable hasta la fecha de caducidad estipulada en la etiqueta. NO CONGELAR. No almacenar en contacto directo con el Sol.

RO


KIT Testare Rapida VetExpert TOXOPLASMOZA FELINA Ab

• Principii:

Kitul de Testare Rapida VetExpert Toxoplasma Felina Ab este o metoda cromatografica de verificare si detectare calitativa a anticorpilor impotriva Toxoplasma Gondii din plasma, sau sange. Kitul de testare rapida toxoplasma Felina Ab este prevazut cu literile „T si „C“ ca linie de test si cu o linie de control pe suprafata dispositivului. Atat linia de test, cat si linia de control nu pot fi vizibile decat in momentul aplicarii mostrelor de test. Linia de control este utilizata pentru controlul procesului. El trebuie sa fie vizibila in orice situatie. Daca testul a fost efectuat corect si daca reacatori din linia de control sunt stimulati de o cantitate suficiente de anticorp Toxoplasma Gondii Felina, o linie purpura va aparea in fereastra de rezultat. Contineaza de Anticorp ai Toxoplasma Gondii cu care este prevazut testul, este special selectata si utilizeaza cu functie de material captator si detectator. Aceasta permite detectarea foarte eficiente a Toxoplasma Gondii Felina din mostrelle de test, de plasma, sau sange.

• Materiale furnizate (5/10 Tests/kit)

- 1) 5/10 Cutite de Testare Rapida VetExpert Toxoplasma Felina Ab
- 2) 1 sticla diluant pentru verificare (3 ml)
- 3) 5/10 sticlete cu anticoagulant
- 4) 5/10 tuburi capilare de unica folosinta
- 5) Instrucțiuni de folosire
- ◆ O linie de culoare închisă indică 10 µl.

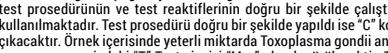

• Precautii:

1) Doar pentru diagnostic veterinar.

2) Pentru obtinerea de rezultate optime, respectati intocmai instructiunile de utilizare.

3) Toate probele testare trebuie tratate ca fiind potențial infectate.

4) Nu desigilati sau scoatiți testul din ambalaj decat in momentul imediat inaintea folosirii.

5) Nu utilizati testul daca acesta are ambalaj deteriorat sau sigiliu rupt.

6) Nu reutilizati testul.

7) Toate substantele reactive trebuie mentinute la temperatura camerei inainte de inceperea testarii.

8) Nu utilizati reactivii daca data lor de expirare marcata pe ambalaj este depasita.

9) Componentele kitului au fost testate si verificate calitativ ca unitati standard ale lotului. Nu amestecați componente ce fac parte din loturi diferite!

• Depozitare:

Kitul poate fi depozitat la temperatura camerei (2–30°C) sau refrigerat. Se recomanda folosirea lui doar in perioada inscrisa pe ambalaj. A NU SE CONGELA! Nu se depozita cu exponere directa la lumina soarelui!

TR

VetExpert Rapid Toxoplasma Ab Test

• Test Prensib:

VetExpert Rapid Toxoplasma kedilerden elde edilen tam kan, serum veya plazmalarında Toxoplasma gondii antikorlarının kaliteli tespiti için geliştirilmiş immuno-kromatograf bir testdir. VetExpert Rapid Toxoplasma Ab test kit'i üzerinde "T" harfi ile gösterilen test çizgisi ve "C" harfi ile gösterilen kontrol çizgisi bölgesi bulunmaktadır. Test kontrol çizgilerini bulunduran pencereye numaralı tespitlerin sağlanmadan önce hemen bir çizgi varsa "C" harfi ile gösterilen kontrol çizgisi ortaya çıkaracaktır. Örneklerdeki üç teknik tespitlerin doğruluğu bu kontrol çizgisi ile tespit edilir. Test bandı, 10 mikrolit olası sonda, 10 mikrolit diluent ile 10 dakika içinde yorumlanır.

• Kütü Içeriği (5,10 Test/kit)

- 1) Kütü içeriğine bağlı olarak 5 veya 10 adet VetExpert Rapid Toxoplasma Ab Test
- 2) 1 adet diluent (3 ml)
- 3) Kütü içeriğine bağlı olarak 5 veya 10 adet tek kullanımlık kapiller örnek tüpü
- 4) Kütü içeriğine bağlı olarak 5 veya 10 adet antikoagulan tüp
- 5) Kullanım Talimatı
- ◆ Kütü üzerindeki siyah çizgi 10 µl yi göstermektedir.

• Güvenlik Talimatları:

1) Sadece Veteriner Hekim kullanımını içindir.

2) En iyi sonuç için burada belirtilen talimatlara uyulmalıdır.

3) Tüm numuneler potansiyel olarak enfeksiyonlu olabileceklerdir.

4) Test kütlerini kullanmadan önce kendin orijinal ambalajında saklanmali ve açılmamalıdır.

5) Test kütlerini içinde bulundugu ambalajı yürütmüş, açılmış veya zarar görmüş ise testi kullanmamız.

6) Her test kütüğü tek kullanımlıktır. Tek kullanımlı kapiller örnek tüpleri, daha sonra 3 adet (Yaklaşık 90 µl) serum, plazma veya tıkanıklık gözleme tespiti için kullanılabilir. Örnekler test edilmeden önce oda sıcaklığında bulundurulmak veya -20°C altında bekletilmelidir.

7) Son kullanma tarihi geçmiş test kütlerini kullanılmamalıdır.

8) Tüm testler, diluent ve diğer kütü içeriği kullanıldığında kütler oda sıcaklığında saklanmalıdır.

PL


Jednostopniowy test do wykrywania przeciwciał przeciwko toksoplazmozie

• Interpretacja wyniku

Jeżeli w lewej części okna wynikowego pojawi się kolorowa linia kontrolna, oznacza to, że test działa prawidłowo. W prawej części okna wynikowego znajduje się linia testowa, której pojawienie się w czasie wykonywania testu oznacza pozytywny wynik badania.


1) Wynik negatywny

Obecność tylko jednej linii ("C") w oknie wynikowym oznacza wynik negatywny dla przeciwciała przeciwko *T. gondii*.

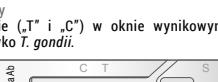


2) Wynik pozytywny

Dwie kolorowe linie ("T" i "C") w oknie wynikowym wskazują na obecność przeciwciała przeciwko *T. gondii*.

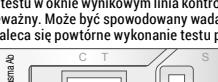

3) Wynik niewłaściwy

Jeżeli po wykonaniu testu w oknie wynikowym linia kontrolna nie jest widoczna, wynik jest uznawany za niewłaściwy. Może być spowodowany wadą testu lub jego nieprawidłowy wykonanie. Zaleca się powtórne wykonanie testu przy użyciu tej samej próbki.

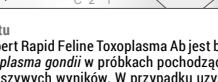

• Ograniczenia testu

Mimo, że test VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab jest bardzo dokładny w wykrywaniu przeciwciała przeciwko *Toxoplasma gondii* w próbkkach pochodzących od kotów, może wystąpić niski odsetek fałszywych wyników. W przypadku uzyskania wyników wątpliwych dalsze testy diagnostyczne, ostateczna diagnoza kliniczna nie powinna być oparta na wynikach pojedynczego testu. W przypadku wszystkich testów diagnostycznych, ostateczna diagnoza kliniczna nie powinna być oparta na lekarskiej weterynarii po analizie wyników wszystkich badań klinicznych i laboratoryjnych.

Czułość - 100%, Specyficzność - 99%

One-step Toxoplasma Ab Test

Feline Toxoplasma Antibody Test


• Βασικές Αρχές

To VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab Test είναι μια χρωματογραφική ανοσοβολγική εξέταση για την ποιοτική ανάγνευση αντισωμάτων κατά του Toxoplasma gondii της γάτας σε πλήρες αίμα, ορό, ή πλάσμα. To VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab Test έχει ένα γράμμα „T“ και „C“, ως γραμμή δοκυμής (Test line) και γραμμή ελέγχου (Control line) στην επιφάνεια της συσκευής. Και οι δύο γραμμές στην παράθυρο αποτελέσματος δεν είναι ορατές, πριν από την εφαρμογή κάποιου δείγματος. Η γραμμή ελέγχου χρησιμοποιείται διαδικαστικά, και πρέπει πάντα να εμφανίζεται, εάν η διαδικασία εκτελείται ουσιαστικά και τα αντιδραστήρια λειτουργούν. Μια μικρή γραμμή δοκυμής θα είναι ορατή στο παράθυρο αποτελέσματος, αν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες Feline Toxoplasma αντισωμάτων στο δείγμα. Στη γραμμή δοκυμής χρησιμοποιούνται ειδικά επιλεγμένα αντιγόνα ως υλικά δέσμευσης και ανάγνευσης. Αυτά επιτρέπουν στο VetExpert rapid Feline Toxoplasma Ab Test να εντοπίζει αντισωμάτων σε πλήρες αίμα, ορό ή πλάσμα με ένα πολύ υψηλό βαθμό ακρίβειας.

• Υλικά που παρέχονται (5,10 τεστ / κιτ)

- 1) 5,10 VetExpert Rapid Feline Toxoplasma Ab Test
- 2) 1 αραωτικό προσδιοριστό (3 ml)
- 3) 5,10 τριχείδη σωληνάρια για το δείγμα
- 4) 5,10 φάλαΐδη με αντιπρικτικό
- 5) Μία (1) Οδηγία για τη χρήση

◆ Μια ακουράχωμη γραμμή στο τριχείδη σωληνάρια είναι η γραμμή δείκτης για πηγούποστη των 10 μl.

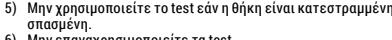

● Προφυλάξεις

- 1) Μόνο για κτηνιατρική διαγνωστική χρήση.
- 2) Για καλύτερα αποτέλεσμα, απαιτείται αυστηρή τήρηση αυτών των οδηγιών.
- 3) Όλα τα δείγματα που θα πρέπει να αντικετωπίζονται ως δυνητικά μολυσματικά.
- 4) Μην ανοιγείτε ή αφαιρέστε τα test από τα αρωτικά σφραγισμένα σακουλάκια τους μέχρι αμέσως πριν από τη χρήση.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε το test εάν η θήκη είναι κατεστραμμένη ή η σφραγίδα είναι σπασμένη.
- 6) Μην επαναχρησιμοποιείτε τα test.
- 7) Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την εκτέλεση της ανάλυσης.
- 8) Μην χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια μετά την αναγράφωμη πημερόνυμη λήξης που αναγράφονται στην ετικέτα.
- 9) Τα συστατικά αυτού του kit έχουν ελεγχότης ποιότητας ως συγκεκριμένη παρτίδα. Μην αναμιγνύετε εξαρτήματα από διάφορεπτικούς αριθμούς παρτίδας.

● Αποδήμηση και Σταθερότητα

To kit μπορεί να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (2 ~ 30°C) ή στο ψυγείο. Το kit είναι σταθερό μέχρι την πημερόνυμη λήξης που αναγράφεται πάνω στην ετικέτα της συσκευασίας. MHN KATAΨΥΧΕΤΕ. Μην αποθηκεύετε το kit δοκυμών στο άμβροστο λιπακό φωτό.

● Επίσημες συσκευασίες

1. Ναζινανέ. Εκτρεστ-τεστ VetExpert Toxoplasma Ab προοριζεται για καθημερινού χρήση σε αντισωμάτων του Toxoplasma gondii μετρημένη χρωματογραφική μεθόδο στον πίνακα.
2. Φασοκό: 10 ή 5 εκτρεστ-τεστ σε καρτονιέρα κορόπες; το πρόστιμο είναι σε γραμμές εμβολίων στα καρτονιέρα κορόπες. Το πρόστιμο είναι σε γραμμές εμβολίων στα καρτονιέρα κορόπες.

● Κομματικά προϊόντα:

- 1) τεστ-καστετο σορτιφερό μεγάλη γενετική εγκατάσταση σε διαδικαστική γέλη
- 2) αναλυτικό ράιζερ με αντικαρφούντα
- 3) πιπέτα οδηγούσα γενετικής απόσπασης
- 4) προσφρύντα γενετικής απόσπασης
- 5) οδηγίες για την εφαρμογή

◆ Ριζική στην πιπέτα γενετικής απόσπασης δεν έχει θερμοποιηθεί.

● Επίσημη ισχύς:

- 1) Επίσημη ισχύς της ημέρας από την ημερομηνία παραγωγής
- 2) Επίσημη ισχύς της ημέρας από την ημερομηνία παραγωγής
- 3) Επίσημη ισχύς της ημέρας από την ημερομηνία παραγωγής

4. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

5. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

6. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

7. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

8. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

9. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

10. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

11. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

12. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

13. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

14. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

15. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

16. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

17. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

18. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

19. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

20. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

21. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

22. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

23. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

24. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

25. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

26. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

27. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

28. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

29. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

30. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

31. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

32. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

33. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

34. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

35. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

36. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

37. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

38. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

39. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

40. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

41. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

42. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

43. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

44. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε όλη την ημέρα.

45. Το κείμενο που παρέχεται στην ετικέτα είναι έγχρωμο και σαφές σε ό